

**medela** 

mother's milk,  
everyday amazing™

# Tire-laits Medela dotés de la technologie Flex™


Une expérience  
d'expression totalement  
inédite et personnalisée



**NOUVEAU**

# Tire-laits Medela dotés de la technologie Flex™

Une expérience d'expression totalement inédite et personnalisée

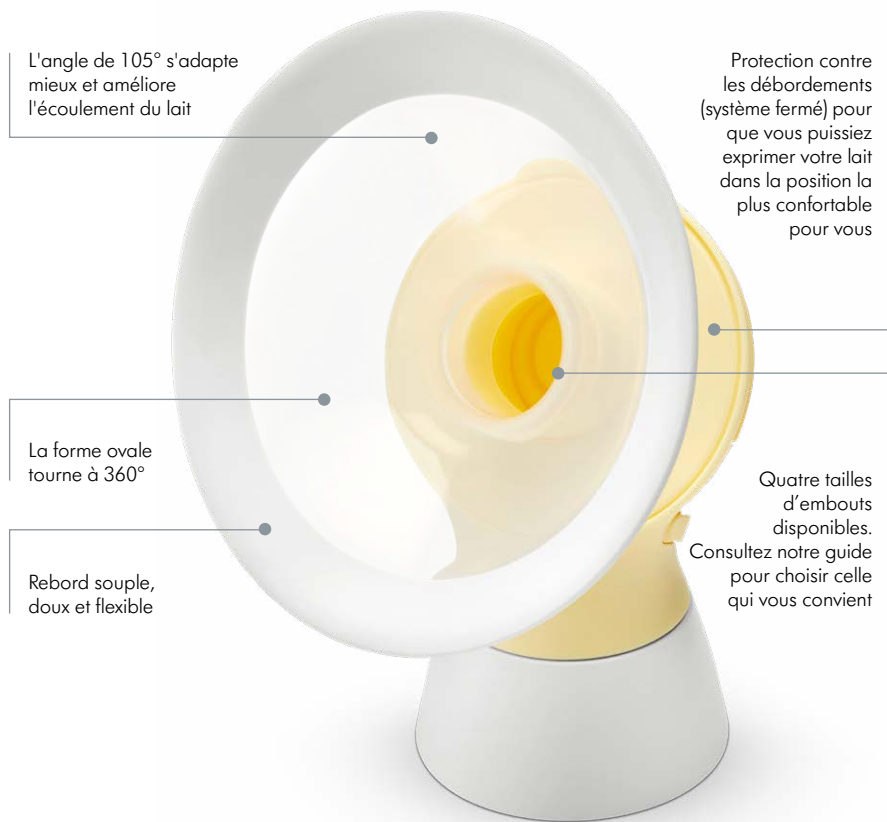

Chaque maman est unique, de la forme de ses seins et de ses mamelons aux exigences de son style de vie. Nos nouveaux tire-laits dotés de la technologie Flex™ sont les premiers conçus pour s'adapter à vos formes et rendre votre expression efficace et confortable.

## Téterelle PersonalFit Flex™

La conception de la téterelle PersonalFit Flex™ est le fruit des recherches d'une équipe de scientifiques avec des mères allaitantes. Sa conception lui permet de s'adapter aisément à vos formes et facilite l'écoulement de votre lait en évitant de comprimer les canaux galactophores. Ces aspects permettent à chaque mère de trouver la position d'expression la plus confortable pour elle. Résultat ? Une expression plus confortable et plus efficace, adaptée à vos besoins.





## Technologie 2-Phase Expression®

Lorsque votre bébé s'alimente au sein, il commence par téter rapidement pour déclencher l'écoulement du lait. Il ralentit ensuite le rythme pour se nourrir. La technologie 2-Phase Expression® de Medela imite ces rythmes instinctifs pour rendre l'expression plus naturelle et plus confortable.

## Double expression

Les recherches montrent que la combinaison unique de la double expression et de la technologie 2-Phase Expression® de Medela augmente la quantité et la teneur énergétique du lait exprimé, et ce, en moins de temps qu'il n'en faudrait pour remplir deux biberons en expression simple.

**Plus de lait et plus de confort ; ce sont les mères qui le disent**

La conception de la tétérelle PersonalFit Flex™ est le fruit de quatre études cliniques menées par notre équipe de scientifiques avec des mères allaitantes. Elle a fait ses preuves en matière de confort et d'efficacité au cours de plus de 1 000 séances d'expression. Comme tous les produits Medela, nos tire-laits Flex™ sont conçus pour faciliter l'allaitement et vous permettre d'apporter plus longtemps à votre bébé les bienfaits exceptionnels de votre lait.



**Le lait maternel, des merveilles au quotidien.** Le meilleur départ dans la vie pour votre bébé. Medela collabore avec des équipes de recherche sur le lait maternel depuis plus de 50 ans. Notre objectif est d'encourager chaque mère allaitante par notre savoir-faire, notre expertise et notre gamme unique d'articles, comme les tire-laits fabriqués en Suisse, recommandés par les professionnels de santé du monde entier.

# Gamme de tire-laits dotés de la technologie Flex™

## Swing Flex™

Pour exprimer votre lait rapidement, efficacement et à tout moment



## Swing Maxi Flex™

Pour obtenir un biberon supplémentaire deux fois plus rapidement



## Freestyle Flex™

La possibilité d'exprimer son lait en toute liberté



Type de tire-lait	Simple et électrique	Double et électrique	Double et électrique
Utilisation recommandée	Occasionnelle	Quotidienne	Quotidienne
Facile à utiliser et confortable	•	•	•
Téterelle PersonalFit Flex™	•	•	•
Niveau de vide réglable	•	•	•
Plage de vide	de - 45 mmHg à - 245 mmHg	de - 45 mmHg à - 245 mmHg	de - 45 mmHg à - 245 mmHg
2-Phase Expression®	•	•	•
Protection contre les débordements (système fermé)	•	•	•
Sans BPA	•	•	•
Connexion à l'appli MyMedela			•
Écran rétro-éclairé affichant le timer, l'état de la batterie, le niveau de vide, la connexion Bluetooth, etc.			•
Chargeur USB			•
Fonctionne sur batterie	Jusqu'à 1 heure (batterie non incluse)	Jusqu'à 1 heure (batterie non incluse)	Jusqu'à 8 séances de double expression (batterie rechargeable intégrée)
Solution tout-en-un pour conserver au frais et transporter le lait maternel exprimé			Sac réfrigérant, biberons de conservation et sac de transport
Poids	200 g sans batterie	220 g sans batterie	> 300 g avec la batterie rechargeable
Taille	12 x 13 x 5,7 cm	12 x 13 x 5,7 cm	14,8 x 6,6 x 4,6 cm

\*Études cliniques, fichier de comparaison entre la téterelle PersonalFit Flex et la téterelle PersonalFit (NCT02496429, NCT02492139, NCT02719548, NCT03091985)

Retrouvez d'autres conseils sur l'allaitement ainsi que sur les tire-laits et les autres produits de Medela sur [www.medela.fr/flex](http://www.medela.fr/flex)